

## Treoir úsáideora

Seomraí le haghaidh comhaireamh ceall de réir DIN 12847.

### Raon feidhme

Baineann na treoracha úsáide le gach seomra comhairimh cille SFU atá liostaithe sa tábla agus atá lipéadaithe mar fheistí leighis IVD diagnóiseacha in vitro agus lean na treoracha úsáide. 

<b>Seomra comhairimh SFU</b>
4262367210003

Seomraí comhairimh diagnóiseacha in vitro a chomhlíonann Rialachán (AE) 2017/746 **déanta** as gloine optúil speisialta agus tá siad oiriúnach do staidéir mhicreascópacha.

### Téamaí le húsáid

Úsáidtear **seomraí comhairimh cille chun líon na gcáithníní a chinneadh (m.sh. leukocytes agus erythrocytes san fhuil, baictéir i gcultúr leachtach)**. Déantar an comhaireamh faoi mhicreascóp tar éis duillín clúdaigh a chur i bhfeidhm ar na seomraí comhairimh.

Tá pearsanra oilte ag na saotharlanna ábhartha, mar sin níl sé de fhreagracht ar an monaróir cur síos a dhéanamh ar an nós imeachta chun an seomra a líonadh agus na cáithníní a chomhaireamh de réir an taisc atá ar láimh. Tá litríocht fhairsing agus lámhleabhair ar an ábhar ar fáil freisin ag brath ar an tasc atá idir lámha.

## Cóireáil ghinearálta

### Rabhadh



Léigh an fhaisnéis go léir go cúramach sula n-úsáideann tú é.



Má tá damáiste nó comharthaí de ghloine briste le feiceáil nuair a osclaítear an pacáistiú, ní gá na spéaclaí a úsáid.

Is dochtúir nó pearsanra cáilithe faoi fhreagracht dochtúir a dhéanann úsáid dhiagnóiseach na ndlísheomraí comhairimh agus meastóireacht ar na hullmhúcháin.


Ní mór an reachtaíocht náisiúnta ábhartha a urramú. Ní mór ceanglais maidir le cosc tionóiscí agus sláinteachais a chomhlíonadh freisin.



Agus tú ag láimhseáil samplaí a d'fhéadfadh a bheith ionfhabhtaíoch, déan cinnte trealamh cosanta pearsanta a chaitheamh. Comhlíonadh na rialachán náisiúnta a bhaineann le cáilíocht an aeir laistigh (m.sh. sláinteachas agus cosc ospidéal ionfhabhtuithe, RKI) sábháilteacht diagnóisic saotharlainne a áirithiú freisin.

### Conas é a úsáid

- Tá na seomraí comhairimh déanta as gloine. Mura láimhsítear i gceart iad, d'fhéadfadh go mbrisfidh siad agus go ndéanfaí damáiste dóibh.
- Tá dromchlaí bun agus teagmhála an tseomra (féach an figiúr) snasta. Ní mór damáiste meicniúil do na dromchlaí seo a sheachaint.
- Déantar an eangach comhairimh atá suite ag bun an tseomra a mhonarú le lamháltas níos lú ná 2 µm. Ní mór damáiste meicniúil agus turraing teirmeach a sheachaint.
- Má úsáidtear na seomraí comhaireamh níos mó ná uair amháin, ní mór iad a ghlanadh de réir na dtreoracha thuas. Is féidir seomraí comhairimh a athúsáid tar éis iad a ghlanadh le dífhabhántán éadrom. Ba cheart an-chúram agus an-aire a úsáid agus tú ag glanadh chun aon bhaol díobhála nó damáiste don seomra a sheachaint. Níor cheart táirgí glantacháin aigéadacha, láidir alcaileach nó tuaslagóir-bhunaithe a úsáid.

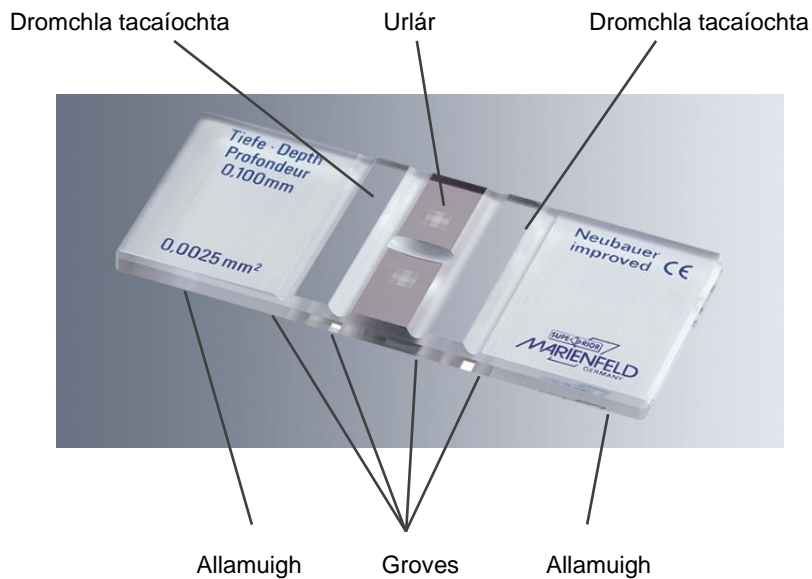

#### Teachtaireacht

Ní mór aon teagmhas tromchúiseach a bhaineann leis an táirge a thuirisciú do Poly-Optik mar an monaróir agus d'údarás iniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-úsáideoir lonnaithe.

#### Déantóir



Polai-Optik GmbH  
Marktstrasse 3  
07422 Bad Blankenburg  
Deutschland (An Ghearmáin)  
Teileafón: +49 (0) 36741 2284.  
Facs: +49 (0) 36741 2325.  
Ríomhphost: info@poly-optik.de  
Idirlíon: www.poly-optik.de

#### Sínithe ag

Axel Weidner, Stiúrthóir Bainistíochta agus Ceann Oibríochtaí  
Poly-Optik GmbH maidir le ceanglais rialála a chomhlíonadh

#### Úinéir an bhranda MARIENFELD SuperIOR

Paul Marienfeld GmbH & Co. KG  
Am Wöllerspfad 4  
97922 Lauda-Königshofen  
Deutschland (An Ghearmáin))